

Carrot 3

Autosæde til børn

Autosædet Carrot 3 er et meget behageligt sæde til børn og unge fra omkring to år.

Specielle fordele ved dette sæde er:

Sædeskal

Sædeskallen har mange fordele på en meget attraktiv facon. Carrot 3 yder lateral støtte til børn med nedsat muskelkontrol i hoved, bryst, hofte og den øverste del af benet. 5-punktsselen med den brede brystpude giver mulighed for yderligere positionering. En overkropsstøtte og en abduktionskile kan give yderligere støtte. De små grå støttepuder kan anvendes overalt på sædet, fordi de kan fastgøres med velcro til alle dele af sædets polstring.

Fleksibel vækst med barnet

Mens barnet vokser, kan sædets dybde og højden på ryglænet øges markant op til en højde på 160 cm. Mindre børn kan hvile deres underben og fødder på den medfølgende pude. En højdejusterbar fodstøtte kan tilføjes for yderligere støtte efter behov. Der er ikke noget sammenligneligt sæde, som har samme store fleksibilitet i forhold til at vokse med barnet.

Letvægtssæde

Carrot 3 vejer kun 8 kg, hvilket er en stor fordel, eftersom autosæder ofte flyttes fra en bil til en anden, eller til et understel for kørsel.



Large

Small

Tekniske data:

Sædedybde: 250-410 mm • Ryghøjde: 520-770 mm • Fodstøtnehøjde: 250-460 mm
Vægt autosæde: ca. 8 kg • Brugervægt: ca. 10-50 kg

Carrot 3 er testet iht. ECE R44/04 og er godkendt til Klasse II og III (15-36 kg). Denne standard omhandler ikke børn med en vægt på over 36 kg. Men Carrot 3 er produceret til personer med nedsat funktionsdygtighed op til 50 kg, og den er testet med en dummy på 49 kg. Svarende til standarden er den ligeledes testet med en dummy på 10 kg, fordi den kan anvendes til børn med en vægt på under 15 kg. I Tyskland og andre europæiske lande er det tilladt at anvende Carrot til kropsvægte fra 10 til 15 kg og 36 til 50 kg, hvis der foreligger en lægeattest på, at personen må anvende Carrot autostolen udenfor vægtområdet på 15 til 36 kg.

Vækst i moduler



Sæt S

+



Skulderbeskyttelse
vingesæt (150 mm)


=




Sæt L

(her med 50 mm sædeforlænger med stang S)

Mål i mm

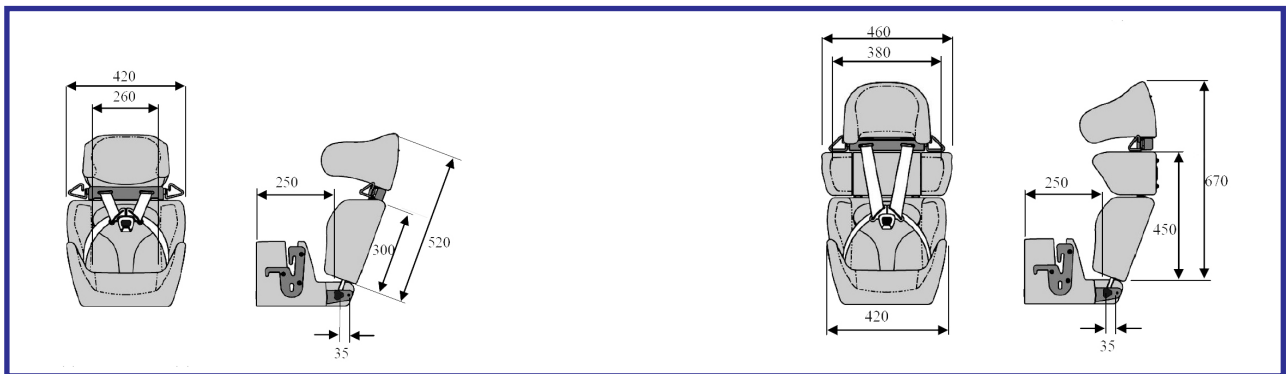

Voksemoduler:

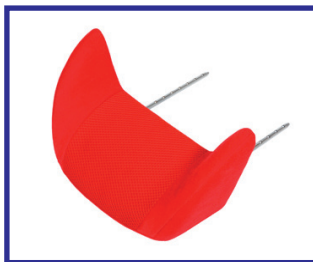

Sædeforlænger med stang L



Sædeforlænger med stang S
50 mm



Sædeforlænger
50 + 100 mm



Ryglænsforlænger
50 + 100 mm


Flere muligheder



Støttebord



Justering af sædevinkel

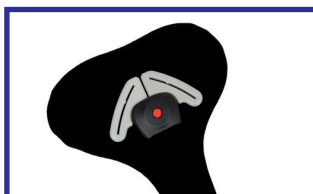

Sikkerhedsspænde



Fodstøtte S, M, L



Med sadelknap og overkrops-
støtte



Med Multiroller

Når barnet vokser – så vokser Carrot også Eksempler på konfigurationer:

Sæt S

(uden vingesæt til skulderbeskyttelse)



Med sædeforlænger med stang L
Reel sædedybde: 450 mm



Basissæde med grå puder
Reel sædedybde 250 mm



Med sædeforlænger med stang S og
50 mm ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 305 mm



Med sædeforlængere med stang S,
50 mm sædeforlænger og 100 mm
ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 360 mm

Basissæt

- Sæde og 100 mm højdejusterbar ryg
- Yderligere puder til sæde og ryg
- To ekstra overkropsspuder
- Alle puder kan fastgøres på betrækket med velcro
- Fempunktssele med quick-releasespænde
- Polstret brystskjold
- Integreerede armlæn
- Seleguide (højre og venstre)
- Betrækket skiftes og vaskes
- Hovedstøttens dybde er justerbar
- Sædedybde justerbar 35 mm

Farver

- blå
- sort
- rød

Tilbehør

- Sædeforlænger med stang L
- Sædeforlænger med stang S, 50 mm
- Sædeforlænger 50 mm
- Sædeforlænger 100 mm
- Pude til justering af sædevinkel
- Fodstøtte, tre størrelser (S, M, L) højdejusterbar, velcrojustering til underben og fødder
- Støttebord
- Luftpude af spacermateriale til at reducere svedafsondring
- Hoftesele
- Abduktionskile
- Overkropsstøtter
- ISO-Base (Isofix-tilslutning)
- ISO-Turn, (drejeskive med Isofix-tilslutning)
- Ryglænsforlænger 50 mm
- Ryglænsforlænger 100 mm
- Forstærket spænde fra 40 Nm (standard) til 80 Nm)
- Sikkerhedsspænde

Typegodkendelse

Iht. ECE-044 04 af Kraftfahrtbundesamt, Nr. 04301283, 15-36 kg. Testet med såvel 10 og 49 kg dummy.

Sæt L

(med vingesæt til skulderbeskyttelse)



35 mm justering af sædedybde uden grå
pude
Reel sædedybde: 300 mm



Med sædeforlænger med stang S
Reel sædedybde: 355 mm



Med sædeforlænger med stang S og 50
mm ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 355 mm



Med sædeforlænger med stang S, 50 mm
sædeforlænger og 100 mm
ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 410 mm

ISO-Base og ISO-Turn til Carrot

Hvordan sikrer jeg bedst mit barn i bilen?

Mange forældre stiller sig selv dette spørgsmål. Et solidt, standardtestet autosæde med høj lateral støtte er én mulighed. Men støtten og styrken i tilfælde af en ulykke øges markant med ISOFIX.

Hvad er ISOFIX?

ISOFIX er en international standard til sikker forankring af autostolen i køretøjet. På siderne af Carrot autosædet er der stålkrøge, som haspes i køretøjets standardiserede stålbeslag. Mange bilproducenter leverer ISOFIX-forankring i flere år uden ekstrapris. Køretøjer, som ikke er udstyrede med ISOFIX-systemet, kan ofte opgraderes, fordi systemet allerede er fastgjort. Crashtests beviser, at støtteeffekten er markant forbedret med ISOFIX-forankring.

RehaNorm Bingen GmbH har to ISOFIX-muligheder til Carrot:

■ ISO-Base til forankring mellem autosædet og køretøjet

■ ISO-Turn, som ydermere har drejeskive.

Begge er anbefalede og testede til personer med en kropsvægt op til 50 kg.

Fakta

- ISO-Base: LxBxH: 41,7x30,5x8,2 cm
- ISO-Turn: LxBxH: 50,5x40,0x48,0 cm, 8 kg, piedestal: 35,0-41,0 cm

ISO-Turn kan anvendes på venstre eller højre side. Specificer venligst ved bestilling.

ISO-Base

Forbinder autosædets stålrammer med køretøjets ISOFIX-håndtag. Den gule plade, som ses på billederne nedenfor, kompenserer for, at køretøjets sæde trykkes ned.



ISO-Turn

gør det muligt at dreje Carrot og brugeren (90 eller 105 graders fastgørelse). Dette er meget anvendeligt, hvis passagerens størrelse og vægt gør det svært at løfte passageren ind i bilen. Ydermere forbliver rygtiltet tilpasningsdygtigt, fordi ryggen fastholdes af **a** **bail**. En søjle giver yderligere stabilitet, hvilket støtter drejeskiven på køretøjets gulv.



Fodstøtte monteret på Carrot



Fodstøtte monteret under ISO-Turn